


# Uwolnienie od nacisku przy pomocy systemów wkładek DARCO

4 rodzaje wkładek – wiele możliwych zastosowań

Wszystkie  
systemy  
wkładowe  
DARCO

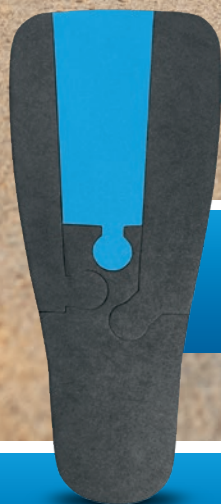

Puzzle Insole®



Relief Contour Insole



PegAssist® Insole




PegContour® Insole



**DARCO**


# Puzzle Insole®

## Wkładka modularna

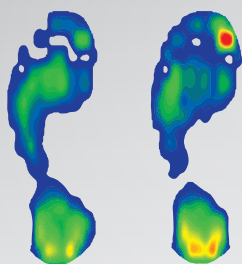


Relief Dual®  
obuwie  
odciążające

Puzzle Insole®  
środkowy moduł zmieniony  
w Relief Dual®

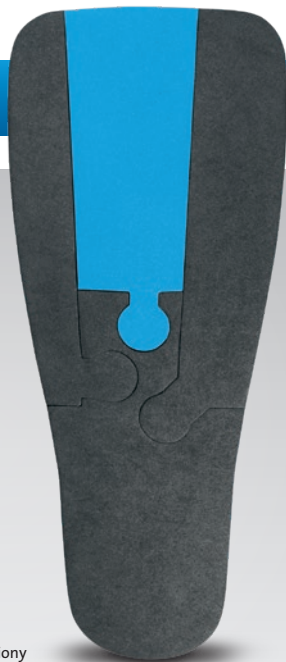

# Relief Contour Insole

## Wkładka wyścielająca

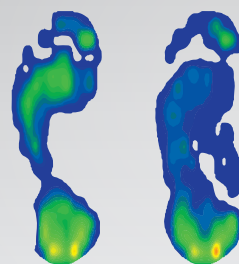

Relief Dual®  
obuwie  
odciążające

Relief Contour Insole  
w Relief Dual®



**Wskazania** – specyficzne uwolnienie od nacisku za pomocą zamiennych elementów modularnych.

Proste zamienianie modułów pozwala na zindywidualizowane i uzależnione od wskazań redystrybuowanie nacisku. Odwrócone 2,4 stopniowe nachylenie klinowe w obrębie pięty pozwala na dodatkowe odciążenie przodostopia. W miejscu, gdzie stopa potrzebuje uwolnienia od nacisku, czarny moduł (Shore A30) jest zastępowany odpowiednim bardziej miękkim modułem EVA w kolorze niebieskim o gęstości Shore A9.

### WSKAZANIA

#### 1 Moduł na mały palec (wąski):


- > bunionette – koślawość V kości śródstopia
- > złamania Jones'a

#### 2 Moduł średni:

- > osteotomia I-IV Weil-a lub Helal-a
- > nerwiak morton'a
- > palce młotkowate, korekcja koślawości V kości śródstopia
- > usztywnienie bliższego stawu śródstopno-paliczkowego

#### 3 Moduł na duży palec (szeroki):

- > osteotomie: Austin-a, Scarf-a, Akin-a, Youngswick-a itp.
- > usztywnienia: Lapidus-a, stawów śródstopno-paliczkowych, stawu palucha

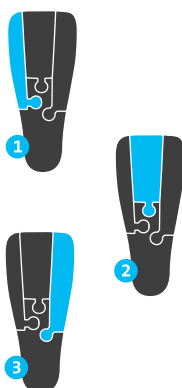

### CECHY

- > zamienne komponenty
- > wkładka jest tak skonstruowana by pasować na prawą i lewą stopę

**Redystrybucja nacisku do 90% dzięki niemal pełnemu kontaktowi stopy z wkładką.**


Wkładka Relief Contour jest wkładką wyścielającą. Redystrybucja nacisku na poziomie prawie 90% jest osiągnięta dzięki anatomicznym konturom wkładki. Łuk poprzeczny oraz podłużny zapewniają optymalne rozłożenie nacisku. Duże punktowe przeciążenia są prawie całkowicie wyeliminowane. Poliuretan, z którego wykonana jest wkładka, szybko wraca do swojego oryginalnego kształtu po nacisku. Zgięcie grzbietowe na poziomie 2,4 stopnia jest osiągane poprzez negatywne nachylenie pięty, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe odciążenie przodostopia. Delikatna wyściółka na powierzchni wkładki poprawia komfort noszenia.

### WSKAZANIA

- > stosowana po następujących zabiegach chirurgicznych w obrębie palucha koślawego i małego palca (austin-a, akin-a, scarf-a, weil-a, Hohmann-a itp.)
- > wrodzone zniekształcenia stopy, koślawości, płaskostopie, nerwica naczyniowa
- > w przypadku występowania zmian angio-neuropatycznych stopy, gdzie mogą się utrzymywać lekkie deformacje

### CECHY

- > wkładka wykonana jest z materiału o wysokiej sprężystości
- > poliuretan może być modyfikowany do indywidualnych potrzeb pacjenta
- > dostępna w wersji na prawą i lewą stopę
- > 2,4° nachylenie klinowe od części dalszej do bliższej

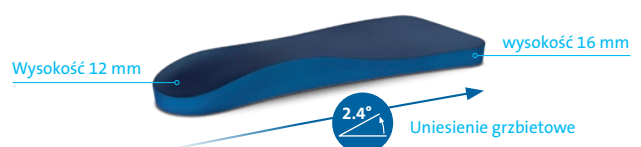



## Zestawienie obuwia i możliwych do zastosowania systemów wkładkowych

|                                                          |                                                                                       | Relief Contour Insole® | PegAssist® Insole | PegContour Insole |   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>MedSurg</b><br>obuwie lecznicze                       |    | ✓                      | ✓                 | ✓                 | ✓ |
| <b>MedSurg Pro®</b><br>obuwie lecznicze                  |    | ✓                      | ✓                 | ✓                 | ✓ |
| <b>Relief Dual®</b><br>obuwie odciążające                |    | ✓                      | ✓                 | ✓                 | ✓ |
| <b>AllRound Shoe®</b><br>obuwie lecznicze długoterminowe |  |                        |                   |                   | ✓ |
| <b>OrthoWedge</b><br>obuwie odciążające                  |  |                        |                   | ✓                 |   |
| <b>OrthoWedge Light</b><br>obuwie odciążające            |  |                        |                   | ✓                 |   |
| <b>HeelWedge®</b><br>obuwie odciążające                  |  |                        |                   | ✓                 |   |
| <b>A.P.B.®</b><br>obuwie ogólnego zastosowania           |  |                        |                   | ✓                 |   |
| <b>SlimLine®</b><br>but na gips                          |  |                        |                   | ✓                 |   |


Poważne obrażenia w obrębie stopy wymagają szybkiego leczenia, by zapewnić jak najlepsze efekty tego procesu. Z tego też powodu odpowiednie rozwiązania mające na celu natychmiastową pomoc są tak ważne. W przypadku indywidualnych rozwiązań w zakresie obuwia dla pacjentów z ZSC, przygotowanie profilaktycznego obuwia długoterminowego wymaga czasu oraz dużego doświadczenia. Wiedza firmy DARCO pozwala na zastosowanie najnowszych osiągnięć oraz technologii w swoich produktach, które znacznie skracają czas przygotowania zarówno rozwiązań długoterminowych, jednak – co ważniejsze – również podnoszą jakość rozwiązań tymczasowych. Dzięki połączeniu obuwia terapeutycznego z szeroką gamą systemów wkładkowych, DARCO stworzyło system modułarny, który odpowiada na oczekiwania w zakresie redystrybucji nacisku bardzo szerokiemu gronu pacjentów.



Instrukcja video na stronie [www.darco-europe.com](http://www.darco-europe.com)

# PegAssist® Insole

## Wkładka odciążająca

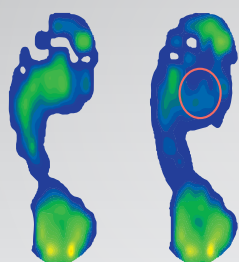

Relief Dual®  
obuwie  
odciążające

PegAssist® Insole  
(MTP II + III odciążone)  
w Relief Dual®



Punktowe odciążenie dzięki tworzeniu indywidualnych stref uwolnienia od nacisku.

Wkładka PegAssist została stworzona w celu dokonania punktowego odciążenia podeszwy części stopy (do 50%) i stosowana jest przede wszystkim w fazach ostrych, ale jest idealna również do leczenia DFS. Proste usuwanie pojedynczych elementów puzzle pozwala na punktowe odciążanie. Cienka podkładka stabilizuje miejsce odciążenia i utrzymuje pozostałe elementy na miejscu. Połączenie 18 mm pianki, Poron-u oraz EVA zapewnia osiągnięcie optymalnego uwolnienia od nacisku.

### WSKAZANIA

Punktowe odciążenie w przypadku występowania:

- > modeli
- > owrzodzeń
- > miejsc przecięcia

### CECHY


- > dostosowana do prawej oraz lewej stopy



Specjalny kształt  
dla obuwia OrthoWedge Light

# PegContour® Insole

## Wyściełająca wkładka odciążająca

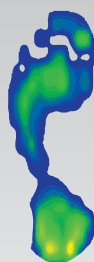

Relief Dual®  
obuwie  
odciążające




PegContour Insole  
(MTP II + III odciążone)  
w Relief Dual®



## Całkowita redystrybucja nacisku jak również opcjonalne miejscowe odciążenie

PegContour® to efektywny trójwymiarowy system wkładek służący redystrybucji nacisku z podeszwy części stopy. Usuwanie poszczególnych elementów wkładki pozwala na jej indywidualizowanie – pooperacyjnie czy też ostrej fazie leczenia ran. Cienka warstwa podkładki wykonanej z EVA (umieszczana od spodu) ma za zadanie stabilizować miejsce odciążenia i utrzymywać pozostałe puzzle na swoim miejscu. Łuk podłużny i poprzeczny zapewniają optymalną redystrybucję nacisku. Nacisk jest zredukowany aż do 55%.

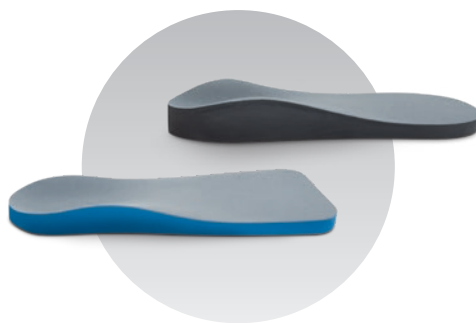

### WSKAZANIA

- > po zabiegach na paluchu koślawym i chirurgiach w obrębie palców (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, itp.)
- > płaskostopie
- > zmiany angio-neuropatyczne stopy w połączeniu z niewielkimi deformacjami

Miejscowe odciążenie w przypadku:

- > modeli
- > owrzodzeń
- > punktów przecięcia

### CECHY

- > miękkie wyściełanie całej wkładki wykonane z praktycznego w zastosowaniu poliestru
- > dostosowujący się do stopy poliuretan
- > można indywidualizować do potrzeb pacjenta dzięki wymiwalnym elementom wkładki
- > dostępny w wersji na prawą oraz lewą stopę



## Lista produktów

| ROZMIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SYMBOL | ROZMIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SYMBOL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  <b>Puzzle Insole®</b><br>odpowiednie dla MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®<br><b>Kobiety</b><br>WS 34,0 – 36,5 PI-WS<br>WM 37,0 – 38,5 PI-WM<br>WL 39,0 – 41,0 PI-WL<br><br><b>Mężczyźni</b><br>MS 39,0 – 41,0 PI-MS<br>MM 41,5 – 43,0 PI-MM<br>ML 43,5 – 45,0 PI-ML<br>MXL 45,5 – 47,0 PI-MXL          |        |  <b>Relief Contour Insole</b><br>odpowiednie dla MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®<br><b>Kobiety</b><br>WS 34,0 – 36,5 Prawa RC-W1-R Lewa RC-W1-L<br>WM 37,0 – 38,5 RC-W2-R RC-W2-L<br>WL 39,0 – 41,0 RC-W3-R RC-W3-L<br><br><b>Mężczyźni</b><br>MS 39,0 – 41,0 RC-M1-R RC-M1-L<br>MM 41,5 – 43,0 RC-M2-R RC-M2-L<br>ML 43,5 – 45,0 RC-M3-R RC-M3-L<br>MXL 45,5 – 47,0 RC-M4-R RC-M4-L      |        |
|  <b>PegAssist® Insole</b><br>odpowiednie dla MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®<br><b>Kobiety</b><br>WS 34,0 – 36,5 PAS-W1<br>WM 37,0 – 38,5 PAS-W2<br>WL 39,0 – 41,0 PAS-W3<br><br><b>Mężczyźni</b><br>MS 39,0 – 41,0 PAS-M1<br>MM 41,5 – 43,0 PAS-M2<br>ML 43,5 – 45,0 PAS-M3<br>MXL 45,5 – 47,0 PAS-M4 |        |  <b>PegContour® Insole</b><br>odpowiednie dla MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®<br><b>Kobiety</b><br>WS 34,0 – 36,5 PCI-W1-R Lewa PCI-W1-L<br>WM 37,0 – 38,5 PCI-W2-R PCI-W2-L<br>WL 39,0 – 41,0 PCI-W3-R PCI-W3-L<br><br><b>Mężczyźni</b><br>MS 39,0 – 41,0 PCI-M1-R PCI-M1-L<br>MM 41,5 – 43,0 PCI-M2-R PCI-M2-L<br>ML 43,5 – 45,0 PCI-M3-R PCI-M3-L<br>MXL 45,5 – 47,0 PCI-M4-R PCI-M4-L |        |
|  <b>odpowiednie dla OrthoWedge, HeelWedge®, A.P.B.®, SlimLine®</b><br>XS 33,5 – 37,0 PAS0<br>S 37,5 – 39,5 PAS1<br>M 40,0 – 41,5 PAS2<br>L 42,0 – 44,0 PAS3<br>XL 44,5 – 47,0 PAS4                                                                                                                       |        |  <b>odpowiednie dla AllRound Shoe®</b><br><b>Prawa Lewa</b><br>XS 37,0 – 38,0 PCI-ARS0-R PCI-ARS0-L<br>S 39,0 – 40,0 PCI-ARS1-R PCI-ARS1-L<br>M 41,0 – 42,0 PCI-ARS2-R PCI-ARS2-L<br>L 43,0 – 44,0 PCI-ARS3-R PCI-ARS3-L<br>XL 45,0 – 46,0 PCI-ARS4-R PCI-ARS4-L<br>XXL 47,0 – 48,0 PCI-ARS5-R PCI-ARS5-L                                                                                   |        |
|  <b>odpowiednie dla OrthoWedge Light</b><br>XS 33,5 – 37,0 PAS-STL0<br>S 37,5 – 39,5 PAS-STL1<br>M 40,0 – 41,5 PAS-STL2<br>L 42,0 – 44,0 PAS-STL3<br>XL 44,5 – 47,0 PAS-STL4                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |