

# Body Armor® Heel Reliever But odciążający piętę

Nowość!

Efektywna redystrybucja nacisku z okolic pięty, w szczególności dla pacjentów leżących.


Jeden uniwersalny rozmiar



## WSKAZANIA

- > Do zapobiegania i leczenia odleżyn na pięcie, w przypadku zespołu stopy cukrzycowej oraz odleżyn
- > 14 punktów lub mniej w skali Bradena
- > Cukrzyca z neurologicznym brakiem czucia
- > Brak wyczuwalnego tętna w stopie
- > Porażenie
- > Długotrwałe unieruchomienie lub śpiączka

Dostępne w dwóch wersjach pianki: karbowana lub gładka.

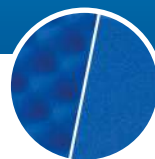

**DARCO**

# Cechy

## Pasek mocujący na przodostopiu oraz podkładka na przodostopie

- > utrzymuje stopę w poprawnej pozycji
- > pozwala na redystrybucję nacisku
- > podkładka na przodostopie zapobiega kontaktowi skóry z paskiem mocującym

## Pianka z ukosowanymi krawędziami oraz narożnikami

- > niweluje nacisk na krawędziach
- > ułatwia zamykanie buta

## Bezpieczne łączenia

- > zmniejszają podrażnianie

## Paski mocujące

- > pozwalają na łatwe zakładanie i zdejmowanie
- > stabilizują stopę w komfortowej pozycji
- > posiadają zaszyte brzegi

## Otwory wentylacyjne

- > wspierają cyrkulację powietrza
- > pomagają w regulowaniu jakości środowiska skóry

## Etykieta

- > można na niej pisać
- > zawiera kod QR z instrukcją użytkowania

## Specjalnie powiększone miejsce na stopę

- > dostosowane do dużych stóp
- > zapewnia odpowiednie ułożenie stopy
- > zabezpiecza przed opadaniem stopy
- > ogranicza rotację stopy

## Otwór piętowy

- > umożliwia wizualną kontrolę ułożenia stopy

## Długa pianka na goleń (30 cm) na stałe zamocowana w bucie

- > redystrybuuje nacisk z pięty
- > zapobiega podwyższeniu ułożenia kolana

## Gładki materiał wierzchni

- > pozwala stopie na swobodne przemieszczanie się na łóżku, bez wpływu na umieszczenie odciążonej stopy w bucie



W pełni adaptowalna  
(Jeden uniwersalny rozmiar)



W celu dostosowania buta można nakładać na siebie obie strony pianki. Pozwala to na utrzymanie w odpowiedniej pozycji nawet bardzo wąskich goleni.

Łatwe dopasowywanie



W uzupełnieniu do pianki obejmującej goleń, do zestawu dodano piankę, którą można stosować w części podeszwowej jaki i goleniowej, dzięki czemu poprawiona jest redystrybucja nacisku oraz bezpieczeństwo stosowania buta.

Klin pozycjonujący



Klin pozycjonujący dodany do zestawu służy zapobieganiu rotacji nogi w bucie.

# Dostosowywanie do indywidualnych potrzeb

Body Armor Heel Reliever można w łatwy sposób dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta, by osiągnąć optymalną redystrybucję nacisku.



Body Armor Heel Reliever przenosi nacisk z pięty na ścięgna oraz mięśnie goleni.

Obszar pięty jest całkowicie uwolniony od nacisku. Pięta jest swobodnie podwieszona w przestrzeni piętowej buta.

## Zestawienie

### Body Armor® Heel Reliever


---

Kolor: szaro-niebieski

Rozmiar: Pasuje na gołeń o średnicy od 25 cm do 54 cm

Odpowiedni do stóp o rozmiarze EU 47


Może być stosowany na prawej oraz lewej stopie

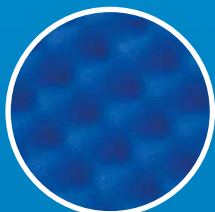

#### Pianka karbowana

Struktura oraz kształt pianki karbowanej gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza oraz pozwala na odczucie miłego efektu chłodzenia.

SYMBOL: BAHR-N

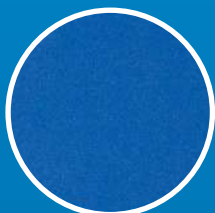

#### Gładka pianka

Ten rodzaj pianki został stworzony specjalnie dla pacjentów z delikatną skórą. W szczególności jest ona odpowiednia dla pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej. Rozwiązanie to pozwala na zabezpieczenie przed tworzeniem obrzęków.

SYMBOL: BAHR-F

### W skład zestawu wchodzi



Podkładka na przodostopie



Klin pozycjonujący



Dodatkowa pianka



#### Worek do prania

Body Armor Heel Reliever może być prany / czyszczony w temperaturze do 60 C w specjalnie dostarczonym worku.



Product video



# ICONIC

ICONIC | Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań  
tel. 608 332 018 | [biuro@iconic.pl](mailto:biuro@iconic.pl) | [www.iconic.pl](http://www.iconic.pl)

DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany  
[info@darco-europe.com](mailto:info@darco-europe.com) | [www.darco-europe.com](http://www.darco-europe.com)



210514