

AllRound Shoe® – Zamknięte obuwie przeznaczone do długotrwałego leczenia

Począwszy od zaopatrzenia pooperacyjnego a kończąc na pielęgnacji stopy z raną – Allrounder – jest kompleksowym rozwiązaniem stosowanym jako obuwie lecznicze, redystybuujące nacisk jak i rehabilitacyjne. Wszystko w jednym przy zachowaniu komfortu oraz prostoty w zastosowaniu.



1. Obuwie zamknięte wykonane z oddychającego materiału bez wyczuwalnych szwów oraz z szerokim otwarciem ułatwiającym zakładanie.
2. Dzięki unikalnej wielowarstwowej konstrukcji, podeszwa jest usztywniona i stabilna oraz dodatkowo na spodniej stronie wyposażona w warstwę antypoślizgową.



DARCO

AllRound Shoe®

Obuwie lecznicze długoterminowe

Perfekcyjne obuwie stosowane po interwencjach chirurgicznych oraz w trakcie leczenia ran na stopie.

Ruch jest życiem – od samego początku DARCO koncentrowało się na poprawie jakości życia pacjentów. Od ponad 30 lat tworzymy rozwiązania ortopedyczne w celu zapewnienia stopie bezpieczeństwa oraz ochrony. Allrounder jest nowym rozwiązaniem o szerokim spektrum zastosowań.



WSKAZANIA

- > zaopatrzenie pooperacyjne
- > leczenie ran

CEL STOSOWANIA

- > podeszwa pozwala na łatwe przemieszczanie się, bez utraty stabilności podczas chodzenia
- > wielowarstwowa konstrukcja podeszwy łączy zachowanie sztywności, w celu utrzymania stabilności, z wyściełaniem dającym odczucie miękkości
- > lekki i oddychający wierzchni materiał chroni przed wodą oraz zabrudzeniami
- > wielowarstwowe otwarcie obuwia gwarantuje ochronę oraz bezpieczne zakładanie
- > wyjmowalna wkładka oraz obszerne wnętrze buta pozwala na umieszczenie w nim stopy, nawet z bardzo dużym opatrunkiem

CECHY

- > stabilny i łatwo dostosowywalny do indywidualnych potrzeb
- > pochłaniająca nacisk oraz antypoślizgowa podeszwa
- > kształt buta gwarantuje odpowiednią ilość miejsca, by umieścić w nim stopę z dużym opatrunkiem, jak również można w nim zastosować wkładkę indywidualną dla pacjenta z ZSC
- > miękki i oddychający materiał wierzchni z rzepami ułatwiającymi zapinanie
- > długi sztywnik w podeszwie wspierający redystrybucję nacisku
- > bardzo szerokie otwarcie buta oraz bezszwowe wnętrze
- > podeszwa o niskim profilu – nie wymaga obuwia wyrównującego
- > stosowany z bandażami, przy spuchniętej stopie, RZS jak i przy deformacjach stóp
- > uniwersalny, można stosować na prawej i lewej stopie

1. Lekki oraz oddychający materiał wierzchni
2. Sztywnik na niemal całej długości podeszwy
3. Jasno-szara, poliuretanowa podeszwa buta o wysokiej stabilności (twardość A60 Shore)
4. Ciemno-szara, wykonana z poliuretanu, antypoślizgowa oraz absorbująca nacisk podeszwa (twardość A50 Shore)



PegContour® Insole

Wkładka odciążająca i wyściełająca

Całkowita redystrybucja nacisku jak również
opcjonalne miejscowe odciążenie

PegContour® to efektywny trójwymiarowy system wkładek służący redystrybucji nacisku z podeszwowej części stopy. Usuwanie poszczególnych elementów wkładki pozwala na jej indywidualizowanie – pooperacyjnie czy też ostrej fazie leczenia ran. Cienka warstwa podkładki wykonanej z EVA (umieszczana od spodu) ma za zadanie stabilizować miejsce odciążenia i utrzymywać pozostałe puzzle na swoim miejscu. Łuk podłużny i poprzeczny zapewniają optymalną redystrybucję nacisku. Nacisk jest zredukowany aż do 55%.

WSKAZANIA

- > po zabiegach na paluchu koślawym i chirurgiach w obrębie palców (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, itp.)
- > płaskostopie
- > zmiany angio-neuropatyczne stopy w połączeniu z niewielkimi deformacjami

Miejscowe odciążenie w przypadku:


- > modeli
- > owrzodzeń
- > punktów przecięcia

CEL STOSOWANIA

- > efektywny system wkładek służący punktowemu uwolnieniu nacisku z podeszwowej części stopy w stanach ostrych
- > nacisk może zostać zredukowany do ok. 55 %
- > optymalna redystrybucja nacisku jest osiągnięta dzięki konturom wkładki

CECHY

- > miękkie wyściełanie całej wkładki wykonane z praktycznego w zastosowaniu poliestru
- > dostosowujący się do stopy poliuretan
- > można indywidualizować do potrzeb pacjenta dzięki wymiwalnym elementom wkładki
- > dostępny w wersji na prawą oraz lewą stopę

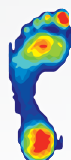

Neutralna



AllRound Shoe®



AllRound Shoe®
z PegContour® Insole
(MTP II + III odciążone)

Lista produktów

ROZMIAR SYMBOL

AllRound Shoe®

Kolor: Czarny

XS	37,0 – 38,0	ARS0
S	39,0 – 40,0	ARS1
M	41,0 – 42,0	ARS2
L	43,0 – 44,0	ARS3
XL	45,0 – 46,0	ARS4
XXL	47,0 – 48,0	ARS5

ROZMIAR SYMBOL


PegContour® Insole

Lewa

Prawa

XS	37,0 – 38,0	PCI-ARS0-L	PCI-ARS0-R
S	39,0 – 40,0	PCI-ARS1-L	PCI-ARS1-R
M	41,0 – 42,0	PCI-ARS2-L	PCI-ARS2-R
L	43,0 – 44,0	PCI-ARS3-L	PCI-ARS3-R
XL	45,0 – 46,0	PCI-ARS4-L	PCI-ARS4-R
XXL	47,0 – 48,0	PCI-ARS5-L	PCI-ARS5-R

Rozmiary i wymiary

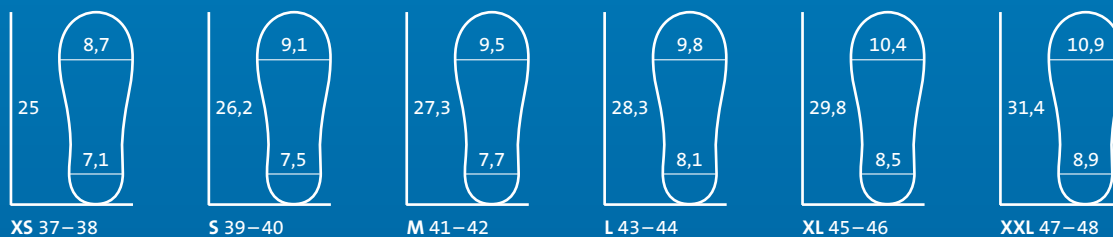

Wszystkie wymiary podane są w centymetrach i odpowiadają wymiarowi wkładki.



ICONIC | Ul. Wrzosowa 28 | 60-185 Skórzewo k/Poznań
tel. 608 332 018 | magdalena.gorna@iconic.pl | www.iconic.pl

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
info@darco-europe.com | www.darco-europe.com



181001