

SLIMFLEX®



SLIMFLEX®
CARBON



Proste rozwiązania.
Nieskończone możliwości.



Proste rozwiązania. Nieskończone możliwości.

Nowe i ulepszone wkładki z linii Slimflex są bardzo proste w zastosowaniu. Zaskoczą Cię i zaczniesz się zastanawiać, jak mogłeś pracować bez nich.



Proste

Neutralne wkładki mogą być stosowane zaraz po wyjęciu z opakowania. Można je również - dosłownie w kilka minut - dostosować do potrzeb każdego pacjenta.

Dostosowywalne

Nowy zestaw klinów i wsporników z linii Slimflex pomaga stworzyć indywidualnie dostosowaną oraz funkcjonalną wkładkę.


Poruszające

Nowoczesny kształt oraz poprawiona estetyka.

Oszczędne

Redukują czas przygotowania wkładki oraz pozwalają na redukcję kosztów.

Nasza oferta

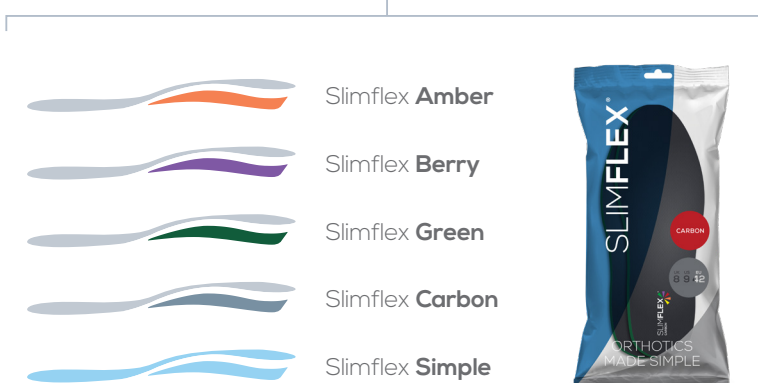

wraz z pełnym zestawem klinów, pelot i innych wsporników...

Prostota ortezy.

Slimflex® Green

Wzmocniona zielona wkładka wykonana z EVA, gwarantuje wsparcie łuku oraz w obrębie pięty. Perforacja pozwala na cyrkulację powietrza poprzez wkładkę, gdy umieszczona jest w bucie. Konturowy kształt zapobiega pronacji i w połączeniu z klinami i innymi komponentami korygującymi, pozwala na szerokie spektrum jej indywidualizowania.

Cechy Produktów:

- Idealna w inicyjalnej fazie leczenia, odpowiednia jako propozycja pierwszej wkładki.
- Perforowana wyściółka pozwalająca na oddychanie dodatkowo redukuje ryzyko pocenia.
- Wysoki profil łuku.
- Trwała wyściółka zewnętrzna.
- Bardzo dobra relacja pomiędzy ceną a jakością
- Idealna do zastosowania z indywidualizowanych klinów oraz podpórek.
- Wykonana z deformowalnego EVA z głębokim korytem na piętę, pozwalającym na lepszą kontrolę ustawienia stopy.
- Termoformowalność EVA pozwala na wykonanie odciążenia we wkładce.
- Pokrycie z materiału zawierającego środki przeciwbakteryjne, co zapobiega rozwojowi mikroorganizmów.



Wskazówki odnośnie zastosowania:

- Spróbujcie zastosować w Slimflex Green 3,5 stopniowy klin w tylnej części wkładki.
- Spróbujcie użyć Slimflex Green z klinem kinetycznym .
- Wykorzystaj 6 mm komponenty stosowane w obrębie pięty wraz z wkładką Slimflex Green w celu wsparcia leczenia zapalenia Achillesa.



Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2223	3	36
SB2224	4	37
SB2225	5	38
SB2226	6	40
SB2227	7	41
SB2228	8	42
SB2229	9	43

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2230	10	45
SB2231	11	46
SB2232	12	47
SB2233	13	49
SB2234	14	50
SB2235	15	51

Slimflex® Amber

Kształtowana wkładka wykonana z EVA posiadająca dodatkowo stabilizator wykonany z EVA o dużej gęstości. Głębokie koryto piętowe oraz wysoki łuk podłużny zapewnia wzmocnione wsparcie oraz większą kontrolę funkcjonalną.


Cechy Produktów:

- Ukształtowana anatomicznie by lepiej pasowała na stopę
- Idealna, gdy konieczna jest zwiększona kontrola korekcyjna.
- Wzmocnione koryto piętowe oraz wyższy łuk dzięki stabilizatorowi wykonanemu z EVA o dużej gęstości, wzmacnia wsparcie.
- Bardzo lekka.
- Perforowana warstwa wierzchnia pozwalająca na oddychanie, kiedy ułożona jest w bucie.
- Możliwość termo formowania pozwala na wykonanie odciążenia.
- Oszczędne cenowo rozwiązanie, które zastosowane w połączeniu z elementami wspierającymi PODOTECH i Slimflex pozwala na indywidualne ich dostosowanie do wymogów pacjenta.



Zastosowanie:

- Użyj Slimflex Amber 5 stopniowym klinem umieszczanym w okolicy pięty.
- Zastosuj Slimflex Amber z klinem kinetycznym .
- wykorzystaj 6 mm komponenty stosowane w obrębie pięty wraz z wkładką Slimflex Amber przy leczeniu szpotawości.

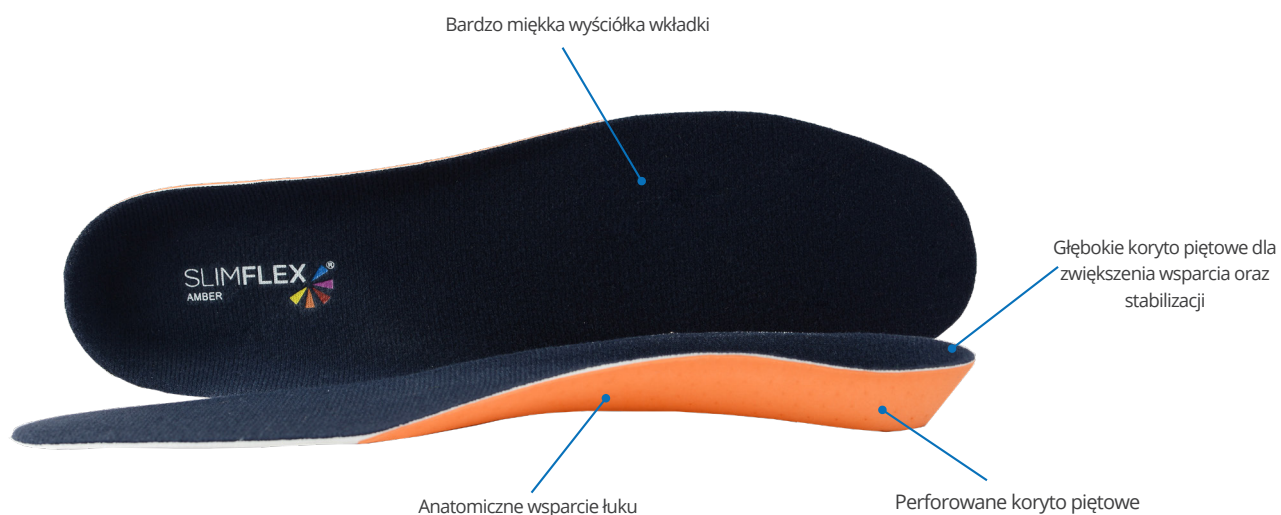

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2543	3	36
SB2544	4	37
SB2545	5	38
SB2546	6	40
SB2547	7	41
SB2548	8	42
SB2549	9½	44
SB2550	10	45
SB2551	11	46
SB2552	12	47
SB2553	13	49
SB2554	14	50
SB2555	15	51

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2538	Child 8	26
SB2539	Child 10	28
SB2540	Child 11½	30
SB2541	Child 13	32
SB2542	Child 1½	34

Slimflex® Berry

Slimflex Berry to ciekawe i niedrogi rozwiązanie dla większości problemów ortopedycznych. Sama w sobie jest idealna dla stóp wymagających dodatkowej kontroli oraz stabilizacji. Przy pomocy komponentów adaptacyjnych PodoTech takich jak peloty, podkładki itp. pozwala na szerokie spektrum indywidualizacji wkładki.

Slimflex Berry nie tylko jest wytrzymałą wkładką, ale w naturalny sposób absorbuje naprężenia w obrębie pięty. Pozwala na większą kontrolę ustawienia stopy oraz korekcje.


Cechy Produktów:

- Ukształtowane śródstopie z kinetyczną kontrolą tyłostopia.
- Płaska, pełna baza nie tylko wyściela przodostopie oraz chroni przed przeciążeniem, ale także ma wzmocnioną część korytową pięty dla poprawy wsparcia.
- Szersze koryto piętowe zapewnia poprawę funkcjonalności.
- Wsparcie łuku podłużnego i poprzecznego poprawia kontrolę ustawienia stopy.
- Wkładka posiada mikroperforacje co poprawia wentylację i redukuje ryzyko przepocenia.
- Absorpcja nacisku poprawia komfort chodzenia.



Zastosowanie:

- Spróbuj zastosowania Slimflex Berry wraz z 3,5 lub 5 stopniowym klinem w obrębie pięty.
- Zastosuj PORON 94 jako materiał odciążający na całości wkładki, by zapewnić większy komfort przy opadaniu kości łódkowatej.

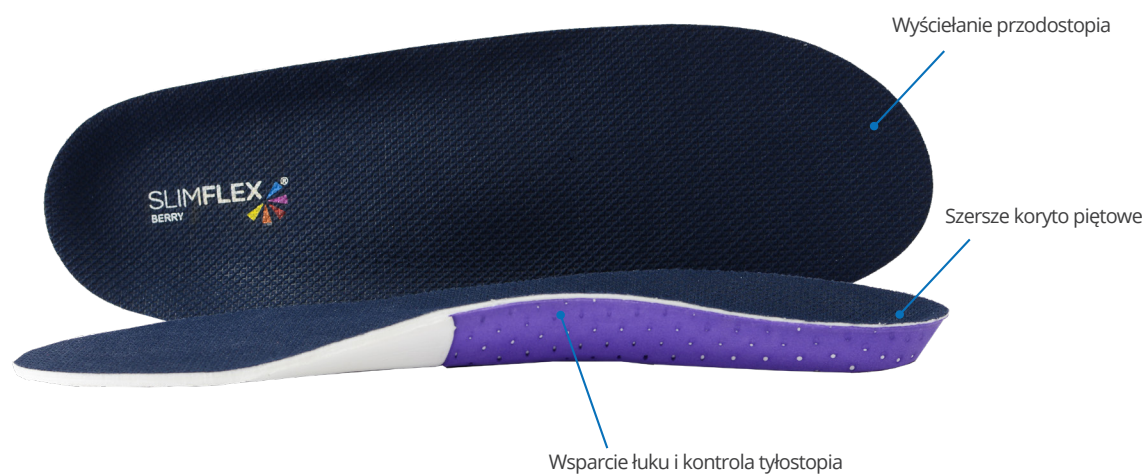

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SC2273	3	36
SC2274	4	37
SC2275	5	38
SC2277	6	40
SC2278	7	41
SC2279	8	42
SC2280	9	43
SC2282	10	45
SC2283	11	46
SC2285	12	48

Slimflex® Carbon

Wkładka wykonana z EVA wyścielana materiałem, który cechuje absorpcja wilgoci i szybkie schnięcie posiadająca dodatkowo węglowe usztywnienie gwarantujące wsparcie funkcjonalne.

Sztywne węglowe wsparcie powoduje, że wkładka jest idealna dla cięższych pacjentów. We wkładce można zastosować komponenty korygujące by dokonać indywidualizacji dostosowania do wymogów pacjenta.

Cechy Produktów:

- Idealne w zastosowaniu jako początkowa faza korekcji przy pomocy wkładek, która oferuje największą kontrolę dzięki swej twardej węglowej bazie.
- wykonana na bazie EVA ze wzmocnieniem wykonanym z włókien węglowych z głębokim korytem piętowym, które pozwala na lepszą kontrolę i korekcję.
- Szybkoschnący oraz pochłaniający wilgoć materiał wyścielający.
- Sama w sobie gwarantuje wsparcie dla łuku poprzecznego i podłużnego.
- Skuteczne w przypadku poważnych problemów biomechanicznych, szczególnie gdy stosowane są wraz z komponentami korygującymi z linii Slimflex.



ULEPSZONE

Zastosowanie:

- Zastosuj Slimflex Carbon w takiej formie w jakiej jest stworzona w przypadku inimalnych zmian w obrębie osi stopy.
- Spróbuj zastosować 3,5 stopniowy klin w piętowej części wkładki Slimflex Carbon.
- Użyj wkładki Slimflex Carbon z kinetycznym klinem.

Sztywna baza powoduje, że wkładka jest idealna dla cięższych pacjentów

szybkoschnąca oraz absorbująca wilgoć wyściółka wkładki

Węglowe koryto piętowe wspierające oraz zapewniające dłuższą żywotność



Wsparcie dla łuku poprzecznego i podłużnego


Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2573	3	36
SB2574	4	37
SB2575	5	38
SB2576	6	40
SB2577	7	41
SB2578	8	42
SB2579	9½	44
SB2580	10	45
SB2581	11	46
SB2582	12	48

EVA Standard Insoles

Podstawowa wkładka wykonana białej EVA z delikatną szarą wyściółką, która może być stosowana jako prosta wkładka, bądź można w niej dokonać modyfikacji przy pomocy komponentów Slimflex.

Cechy Produktów:

- Tanie rozwiązanie, gdy używane jest razem z komponentami PODOTECH
- Typowa prosta wkładka którą można modyfikować.
- Płaska podstawa powoduje, że łatwo mocuje się do niej elementy korygujące dzięki czemu szybko tworzy się efektywne rozwiązanie dla pacjenta.

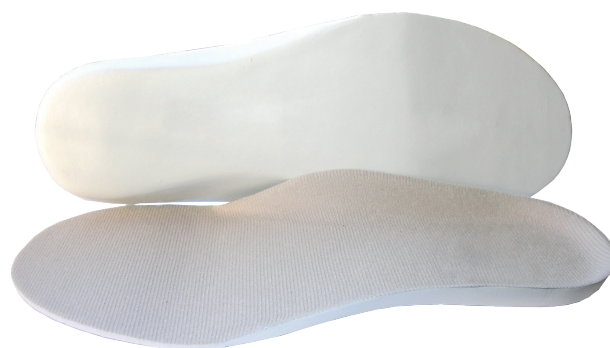

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2026	3	36
SB2027	4	37
SB2028	5	38
SB2030	6	40
SB2031	7	41
SB2032	8	42

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2034	9	43
SB2035	10	45
SB2036	11	46
SB2038	12	48
SB2039	13	49
SB2040	14	50

Slimflex® Wedge Kits

Slimflex Wedge Kit to zestaw prefabrykowanych klinów gotowych do zastosowania z wkładkami Slimflex.

Zestaw zawiera:

- Lewy klin pod piętę - 3,5 °.
- Prawy klin pod piętę - 3,5 °.
- Lewy klin pod piętę - 5 °.
- Prawy klin pod piętę - 5 °.
- 2 x kliny do korekcji przodostopia - 5 °.

Cechy zestawu:

- Niwelacja odpadów w przypadku niewielkiego zużycia.
- Łatwe przechowywanie.
- Podklejenie ułatwia stosowanie.

Symbol	Opis	Rozmiar Wkładki WB	Rozmiar Wkładki UE
SB4220	X-Small	12 - 2½	30 -35
SB4222	Small	3 - 6½	36 - 40
SB4224	Medium	7 - 10½	41 - 44
SB4226	Large	11 - 14½	45 - 51



Slimflex® Simple Orthotics



ULEPSZONE



Shore A30

Mała Gęstość



Shore A50

Średnia Gęstość



Shore A65

Duża Gęstość

Cechy Produktów:

- Stworzone po to, by w szybki sposób wykonać efektywne zaopatrzenie ortopedyczne na stopę.
- Zintegrowane odcięcie na wysokości pierwszej kości śródstopia, by ułatwić działanie mechanizmu kołowrotka.
- Wzniesienie śródstopowe.
- Płaska baza ułatwia zastosowanie klinów i innych elementów korygujących.
- Głębokie koryto zapewnia większą kontrolę.
- Całkowicie termiformowalna oraz nadająca się do szlifowania.

Wskazania do Zastosowania:

- W związku z poziomem osiągalnego indywidualizowanego dostosowania Slimflex Simple daje nieograniczone możliwości leczenia.
- Slimflex Simple jest rekomendowana wtedy kiedy czas wykonania wkładki jest priorytetem i gdzie takie rozwiązanie biomechaniczne pozwala na leczenie patologii.

Oferowane Produkty:

Mała Gęstość (Shore A30)
Zapewnia komfort i średni poziom kontroli funkcjonalnej. Odpowiednia dla pacjentów z ZSC oraz w podeszłym wieku z problemami z podeszwową tłuszczową wyściółką stopy. Wersja pełna pozwala na pewne pozycjonowanie przodostopia oraz poprawiony komfort.

Średnia Gęstość (Shore A50)
Bardzo dobre rozwiązanie ogólnego zastosowania. Oferuje uniwersalny poziom wsparcia oraz kontroli funkcjonalnej, które mogą być poprawione poprzez zastosowanie komponentów korygujących.

Duża Gęstość (Shore A65)
Odpowiednie dla cięższych pacjentów, bardzo trwałe również dla bardzo aktywnych użytkowników.


Sposoby Indywidualizowania:

Termoformowalne oraz szlifowalne, Slimflex Simple pozwala na wykonanie modyfikacji w krótkim czasie. Płaska baza pozwala na stosowanie różnego rodzaju podpórek.

- Proste słupki przyśrodkowe i boczne.
- Dodatki do podnoszenia pięty.
- Zwiększenie śródstopia / dodatkowe paski.
- Wzmocnienia na łuku i tylnej części stopy.
- Modyfikacja kształtu.

Zastosowanie:

Wypróbuj zastosować 3,5 lub 5 stopniowe kliny na piętowej części wkładki Slimflex Simple 3/4 o małej gęstości oraz 3 mm szary Poron pokrywający całą wkładkę lecząc reumatoidalne zapalenie stawów.

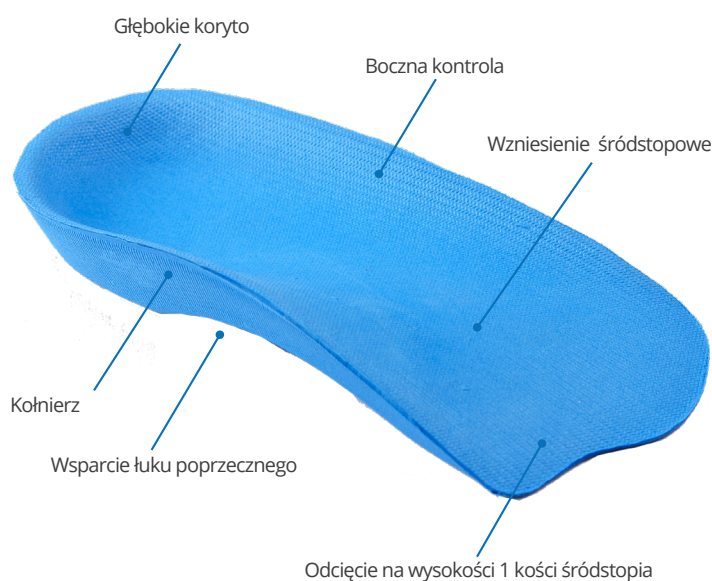

Simple ¾ - Mała Gęstość

Wybierz tą wkładkę w celu zapewnienia pełnego komfortu oraz optymalnego dostosowania do obuwia.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB3120	Child 12 - 13½	30 - 32
SB3121	Child 1 - 2½	33 - 35
SB3122	3 - 4½	36 - 38
SB3123	5 - 6½	39 - 40
SB3124	7 - 8½	41 - 42
SB3125	9 - 10½	43 - 44
SB3126	11 - 12½	45 - 48
SB3127	13 - 14½	49 - 51




Shore A30

Simple ¾ - Średnia Gęstość

Wybierz tą wkładkę w celu zapewnienia umiarkowanego komfortu oraz optymalnego dostosowania do obuwia.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2557	Child 12 - 13½	30 - 32
SB2559	Child 1 - 2½	33 - 35
SB2561	3 - 4½	36 - 38
SB2563	5 - 6½	39 - 40
SB2565	7 - 8½	41 - 42
SB2567	9 - 10½	43 - 44
SB2569	11 - 12½	45 - 48
SB2571	13 - 14½	49 - 51

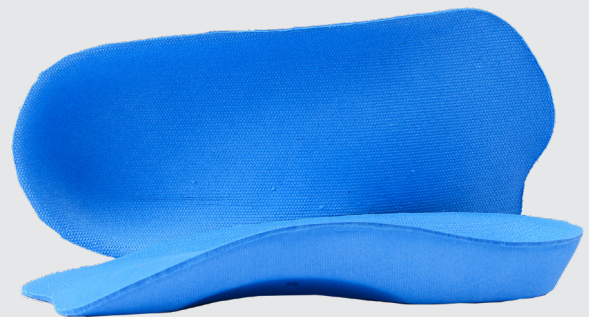

Shore A50

Simple ¾ - Duża Gęstość

Wybierz tą wkładkę w celu zapewnienia maksymalnej kontroli oraz optymalnego dostosowania do obuwia.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB3102	Child 12 - 13½	30 - 32
SB3104	Child 1 - 2½	33 - 35
SB3106	3 - 4½	36 - 38
SB3108	5 - 6½	39 - 40
SB3110	7 - 8½	41 - 42
SB3112	9 - 10½	43 - 44
SB3114	11 - 12½	45 - 48
SB3116	13 - 14½	49 - 51



Shore A65

Simple Pełne - Mała Gęstość

Wybierz tę wkładkę w celu zapewnienia pełnego komfortu oraz wsparcia całej stopy.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2957	Child 12 - 13½	30 - 32
SB2959	Child 1 - 2½	33 - 35
SB2961	3 - 4½	36 - 38
SB2963	5 - 6½	39 - 40
SB2965	7 - 8½	41 - 42
SB2967	9 - 10½	43 - 44
SB2969	11 - 12½	45 - 48
SB2971	13 - 14½	49 - 51



Shore A30

Simple Pełne - Średnia Gęstość

Wybierz tę wkładkę w celu zapewnienia umiarkowanego komfortu oraz wsparcia całej stopy.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2937	Child 12 - 13½	30 - 32
SB2939	Child 1 - 2½	33 - 35
SB2941	3 - 4½	36 - 38
SB2943	5 - 6½	39 - 40
SB2945	7 - 8½	41 - 42
SB2947	9 - 10½	43 - 44
SB2949	11 - 12½	45 - 48
SB2951	13 - 14½	49 - 51



Shore A50

Simple Pełne - Duża Gęstość

Wybierz tę wkładkę w celu zapewnienia maksymalnego komfortu oraz wsparcia całej stopy.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB2972	Childs 12 - 13½	30 - 32
SB2973	Childs 1 - 2½	33 - 35
SB2974	3 - 4½	36 - 38
SB2975	5 - 6½	39 - 40
SB2976	7 - 8½	41 - 42
SB2977	9 - 10½	43 - 44
SB2978	11 - 12½	45 - 48
SB2979	13 - 14½	49 - 51



Shore A65



Slimflex® Simple - Zestaw Wkładka Oraz Elementy Korygujące

Zestaw został stworzony by zapewnić wygodne rozwiązanie pozwalające na modyfikację wkładki. Każdy zestaw zawiera parę pełnych wkładek Slimflex oraz podklejone kliny, pozwalające na wspieranie zarówno przedo- jak i tyłostopia.

Zestaw zawiera:

- Lewy klin pod piętę - 3,5 °.
- Prawy klin pod piętę - 3,5 °.
- Lewy klin pod piętę - 5 °.
- Prawy klin pod piętę - 5 °.
- 2 x kliny do korekcji przodostopia - 5 °.

Korzyści zestawu:

- Zmniejsza straty materiału szczególnie u tych użytkowników, którzy nie wykonują dużej ilości wkładek.
- Niskie koszty zakupu.
- Latwe przechowywanie.
- Podklejane kliny.

Cechy zestawu:

Wzniesienie śródstopowe - wspiera część śródstopia i redystrybuuje potencjalne przeciążenia stopy.

Głębokie korytka piętowe - wspiera piętę i redukuje nacisk poprzez jego redystrybucję na większy obszar stopy, jednocześnie stabilizując stopę dając większą kontrolę funkcjonalną.

Kołnier - zwiększa kontrolę w środkowej części tyłostopia. Zapewnia korekcję, stabilizację oraz trening poprawnego chodu - zwiększa wsparcie łuku.

Wsparcie łuku poprzecznego i kontrola boczna - poprawia odpowiednie ustawienie stopy w osi.



Wybór Rozmiaru			¾			Pełne		
Rozmiaru	UE	WB	Mała Gęstość	Średnia Gęstość	Duża Gęstość	Mała Gęstość	Średnia Gęstość	Duża Gęstość
CS	30-32	12-13½	SB4402	SB4422	SB4442	SB4360	SB4380	SB4300
CL	33-35	1-2½	SB4404	SB4424	SB4444	SB4362	SB4382	SB4302
XS	36-38	3-4½	SB4406	SB4426	SB4446	SB4364	SB4384	SB4304
S	39-40	5-6½	SB4408	SB4428	SB4448	SB4366	SB4386	SB4306
M	41-42	7-8½	SB4410	SB4430	SB4450	SB4368	SB4388	SB4308
L	43-44	9-10½	SB4412	SB4432	SB4452	SB4370	SB4390	SB4310
XL	45-48	11-12½	SB4414	SB4434	SB4454	SB4372	SB4392	SB4312
XXL	49-51	13-14½	SB4416	SB4436	SB4456	SB4374	SB4394	SB4314



Slimflex® Comfort - ¾ - Mała Gęstość

Slimflex Comfort to kombinacja wspianego kształtu Slimflex Simple z wykończeniem wykonanym z delikatnego materiału wierzchniego zapewniającego komfort oraz jeszcze większe skrócenie czasu wykonania modyfikacji.

- Nylonowy materiał wyściełając zapewnia komfort oraz absorpcję wilgoci.
- Pakowane pojedynczo.

Wybierz ten rodzaj wkładki by zapewnić sobie maksymalną kontrolę oraz zagwarantować dobre dopasowanie do buta.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB6098	Childs 12 - 13½	30 - 32
SB6100	Childs 1 - 2½	33 - 35
SB6102	3 - 4½	36 - 38
SB6104	5 - 6½	39 - 40
SB6106	7 - 8½	41 - 42
SB6108	9 - 10½	43 - 44
SB6010	11 - 12½	45 - 48
SB6012	13 - 14½	49 - 51

NOWOŚĆ



Shore A30

Slimflex® Comfort - Pełna - Mała Gęstość

- Nylonowy materiał wyściełając zapewnia komfort oraz absorpcję wilgoci.
- Pakowane pojedynczo.

Wybierz ten rodzaj wkładki by zapewnić sobie maksymalną kontrolę oraz zagwarantować wsparcie całej stopy.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB6080	Childs 12 - 13½	30 - 32
SB6082	Childs 1 - 2½	33 - 35
SB6084	3 - 4½	36 - 38
SB6086	5 - 6½	39 - 40
SB6088	7 - 8½	41 - 42
SB6090	9 - 10½	43 - 44
SB6092	11 - 12½	45 - 48
SB6094	13 - 14½	49 - 51



Shore A30



Slimflex® Comfort - ¾ - Średnia Gęstość

Slimflex Comfort to kombinacja wspianego kształtu Slimflex Simple z wykończeniem wykonanym z delikatnego materiału wierzchniego zapewniającego komfort oraz jeszcze większe skrócenie czasu wykonania zaawansowanych modyfikacji..

- Nylonowy materiał wyściełając zapewnia komfort oraz absorpcję wilgoci.
- Pakowane pojedynczo.

Wybierz ten rodzaj wkładki by zapewnić sobie maksymalną kontrolę oraz zagwarantować dobre dopasowanie do buta.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB4100	Childs 12 - 13½	30 - 32
SB4102	Childs 1 - 2½	33 - 35
SB4104	3 - 4½	36 - 38
SB4106	5 - 6½	39 - 40
SB4108	7 - 8½	41 - 42
SB4110	9 - 10½	43 - 44
SB4112	11 - 12½	45 - 48
SB4114	13 - 14½	49 - 51

NOWOŚĆ



Shore A50

Slimflex® Comfort - Pełne - Średnia Gęstość

- Nylonowy materiał wyściełając zapewnia komfort oraz absorpcję wilgoci.
- Pakowane pojedynczo.

Wybierz ten rodzaj wkładki by zapewnić sobie maksymalną kontrolę oraz zagwarantować dobre wsparcie całej stopy.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB4116	Childs 12 - 13½	30 - 32
SB4118	Childs 1 - 2½	33 - 35
SB4120	3 - 4½	36 - 38
SB4122	5 - 6½	39 - 40
SB4124	7 - 8½	41 - 42
SB4126	9 - 10½	43 - 44
SB4128	11 - 12½	45 - 48
SB4130	13 - 14½	49 - 51



Shore A50



Slimflex® Comfort - ¾ - Duża Gęstość

Slimflex Comfort to kombinacja wspaniałego kształtu Slimflex Simple z wykończeniem wykonanym z delikatnego materiału wierzchniego zapewniającego komfort oraz jeszcze większe skrócenie czasu wykonania modyfikacji.

- Nylonowy materiał wyścielający zapewnia komfort oraz absorpcję wilgoci.
- Pakowane pojedynczo.

Wybierz ten rodzaj wkładki by zapewnić sobie maksymalną kontrolę oraz zagwarantować dobre dopasowanie do buta.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB5050	Child 12 - 13½	30 - 32
SB5052	Child 1 - 2½	33 - 35
SB5054	3 - 4½	36 - 38
SB5056	5 - 6½	39 - 40
SB5058	7 - 8½	41 - 42
SB5060	9 - 10½	43 - 44
SB5062	11 - 12½	45 - 48
SB5064	13 - 14½	49 - 51



Shore A65

Slimflex® Comfort - Pełne - Duża Gęstość

- Nylonowy materiał wyścielający zapewnia komfort oraz absorpcję wilgoci.
- Pakowane pojedynczo.

Wybierz ten rodzaj wkładki by zapewnić sobie maksymalną kontrolę oraz zagwarantować dobre wsparcie dla całej stopy.

Symbol	Rozmiar WB	Rozmiar UE
SB5068	Child 12 - 13½	30 - 32
SB5070	Child 1 - 2½	33 - 35
SB5072	3 - 4½	36 - 38
SB5074	5 - 6½	39 - 40
SB5076	7 - 8½	41 - 42
SB5078	9 - 10½	43 - 44
SB5080	11 - 12½	45 - 48
SB5080	13 - 14½	49 - 51



Shore A65



Slimflex® - Podkładka 2-5 PMP

Pomaga poprawić funkcjonalność pierwszej kości śródstopia i minimalizuje jej zgięcie grzbietowe.

Ponadto dzięki zastosowaniu podkładki można odciążyć trzeszczki.

- Podklejany spód.
- Sprzedawany w opakowaniach po 5 sztuk.

Symbol	Rozmiar
SB2496	Small
SB2494	Large



Slimflex® Pelota Śródstopna

Slimflex Met Dome są podklejane, dzięki czemu łatwe w zastosowaniu. Są dostępne w 5 rozmiarach. Rozmiary peloty 3 i 4 są podobne jednakże rozmiar 4 jest delikatnie grubszy.

- Rozmiarówka pokrywa wszystkie rozmiary stopy od małej do bardzo dużej.
- Peloty 3 i 4 mają zbliżony kształt ale rozmiar 4 ma wyższy profil.
- Sprzedawane w opakowaniach po 10 sztuk.

Symbol	Rozmiar
SB2480	Size: 1
SB2482	Size: 2
SB2484	Size: 3
SB2486	Size: 4
SB2488	Size: 5



Slimflex® Met Sulcus Pad

Podkładka ta została stworzona by pomóc pacjentom z syndromem bólu przodostopia. Pelota w przedniej części ogranicza zgięcie podeszwowe w mniejszych stawach palczkowych.

Materiał, z którego jest wykonana może być łatwo docinany by dopasować podkładkę do anatomii stopy pacjenta.

- Podklejany spód.
- Sprzedawana w opakowaniach po 5 sztuk.

Symbol	Rozmiar
SB2492	Small
SB2490	Large



ICONIC

ICONIC działa na rynku od 2010 roku i aktywnie wspiera specjalistów zajmujących się leczeniem, pielęgnacją oraz ortopedycznym zaopatrzeniem stopy, oferując sprawdzone na świecie rozwiązania w tym zakresie.

Oferta firmy obejmuje 3 główne grupy produktowe:

1 Produkty wspomagające proces leczenia ran na stopie przy pomocy rozwiązań pozwalających na redystrybucję nacisku z miejsca występowania rany.

2 Produkty stosowane podczas wykonywania zabiegów podologicznych.

3 Produkty stosowane do wykonania wkładek indywidualnych, jako działanie profilaktyczne zabezpieczające przed ponownym wystąpieniem ran na stopie.

Każdy z wymienionych zakresów działania firmy wspiera inny aspekt terapeutyczny.

Począwszy od stanów ostrych występujących w momencie pojawienia się rany w początkowej fazie leczenia, gdzie dzięki redystrybucji nacisku przyspieszony zostaje proces leczenia, przez pielęgnację w trakcie leczenia oraz kończąc na prewencyjnym zabezpieczeniu stopy, którego zadaniem jest zapobieganie ponownemu wystąpieniu owrzodzeń.

Oferowane produkty mają na celu skuteczne wsparcie tych terapii. Są to najbardziej funkcjonalne oraz popularne rozwiązania gwarantujące komfort dla pacjenta oraz satysfakcję z przebiegu procesu leczenia, których istotną cechą jest dobra relacja pomiędzy jakością i ceną.

Oferta została stworzona na bazie doświadczeń oraz przy współpracy specjalistów z różnych krajów, tak by sprostać oczekiwaniom polskiego rynku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat interesujących Państwa produktów, prosimy o kontakt mailowy na adres: magdalena.gorna@iconic.pl lub telefoniczny pod numerem +48 602 105 120.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wszystkich potrzebnych informacji.